

製造・販売元



〒624-0823 京都府舞鶴市京田187-1

TEL 0773-75-8688

FAX 0773-78-9035

MAIL geltron@geltron.jp



株式会社パシフィックウェーブWebサイト https://pacificwave.co.jp



製品保証規定

- ■商品サイズは加工工程により多少の差が生じる場合があります。
- ■製品改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
- ■製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。




Geltron Catalog



ジェルトロン カタログ

ジェルトロンは 「人を想う」 ものづくりから生まれています。

仕方がないとあきらめていませんか? ジェルトロンだからこそ できることがあります。

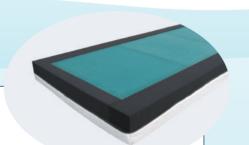

リラックスして ゆったりと眠ってほしい

ジェルトロンマットレスは、床ずれの防止に必要な体圧分散性と、皮膚にかかる負荷を軽減するずれ吸収性に優れています。また眠る時の最適な姿勢を整えるため、ご使用される方の体格に合わせた硬さに設定することが可能です。床ずれ防止環境と、快適な睡眠環境を両立させた、心地よく眠れるマットレスです。

マットレスはP.7~

製品を使っていただくことで、お客様のお困りごとに寄り添いたい。

良きパートナーとして末長く愛用していただきたい

「出かけるのが楽しみになった」「眠るのが楽しみになった」と感じてほしい。


そんな願いを込めながら、お客様の喜ばれる姿を思い描き

立体形状ジェルのパイオニアとして

常に信頼されるものづくりをしていきたいと考えています。

人の手だからこそできるものづくりで、ジェルトロンの製品は生まれています。

包み込まれる安心感の中で 眠ってほしい

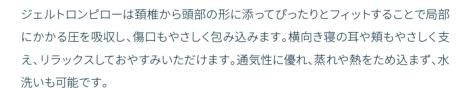


ピローはP.11~

痛みなくおだやかに



ジェルトロンクッションは、ジェルが形状を変えながら臀部を包み込むことで、座骨など骨突出部分への負担が減り痛みを和らげます。また、振動吸収性があり、車椅子で移動するときも姿勢の崩れや振動によるからだへの負担を減らすことができます。 通気性にも優れ蒸れにくく、気持ちよくお使いいただけます。


クッションはP.13~

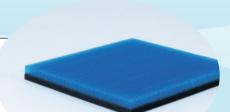



ジェルトロンとは

睡眠時の体への負荷を取り除くために開発された、多層立体形状ジェルで、マットレスやまくら、クッションなどに使用されています。グミキャンディのような感触で、体の凸凹や動きに柔軟になじみながら、睡眠を阻害するあらゆる負担をカット。まるで水の中に包まれているような浮遊感で、良質な睡眠へ導きます。その素材の特性から、様々な用途に活用されています。

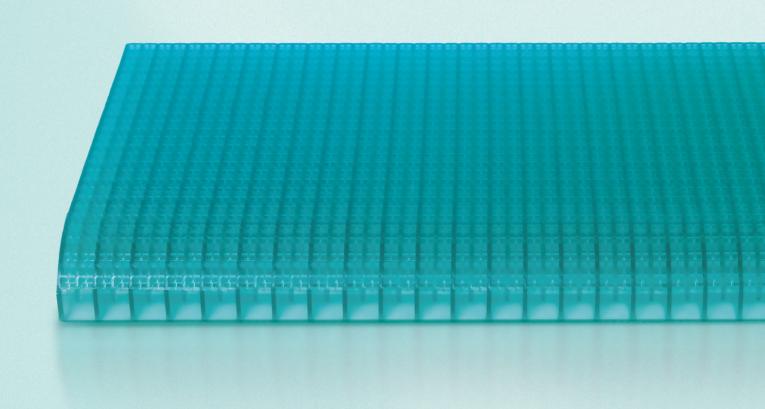



快適な寝ごこち

起きたとき体が痛い 肩や腰のコリを感じる 疲れが取れない

体の凸凹に合わせ、柔軟に形状を変化させることで、睡眠中の体にかかる余分な負荷を軽減します。局部的な圧迫を分散しつつ、広い面積ではしっかりと支え、常に快適でリラックスできる寝心地をキープ。不要な寝返りが少なくなり、毎日の睡眠の質が上がります。



血行不良の軽減

睡眠中のしびれ 体の痛みで目が覚める

垂直にかかる重さはもちろん、寝返りで生じるずれ・ねじれなど、多方向からの圧力も吸収し、毛細血管の血行障害を防ぎます。肌と接している素材が、体の形や動きに応じて柔軟に動くので、スムーズな寝返りが可能になり、ストレスのない睡眠を体感していただけます。



優れた耐久性

長く使える マットレスが欲しい

8万回の繰り返し圧縮テストでは、復元率99.6% 以上を記録。ウレタン素材の約3~5倍の耐久性 を持ち、長年繰り返し使っても歪みが小さく、 形状安定性にも優れていることが証明されて います。また温度によって硬さが変わることも ほとんどないため、季節を問わず安定した使い 心地です。



蒸れずに快適

汗でマットレスが じっとり

ジェルトロンは空気の層を多く含み、立体形状 ジェルの変形時に中の空気が入れ替わる仕組み になっています。ジェルの壁が体重で潰れるたび、 マットレスの外に蒸れた空気を排出して新しい 空気を取り込むので、常に通気性抜群。発汗 などによる湿潤を減らし、四季を通して快適な 寝心地を実現します。



水洗いOK

衛生的に使いたい

マットレスは洗えないものがほとんどですが、ジェルトロンは水洗いOK。ファスナー式の製品カバーを外したあと、汚れた部分を取り外しご家庭でお手入れすることができます。長年使用による汚れや臭いがついた場合にはもちろん、不意に汚れた場合にも簡単スッキリ。衛生的にご使用いただけます。



人と地球にやさしい

ジェル素材って 安心なの?


素材には、米国食品医薬局(FDA)が認可したミネラルオイルとポリマーを使用。アレルギー誘発性がなく、ダニ、カビの温床にもならないため、赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使いいただけます。また環境汚染物質も含まれておらず、リサイクル可能。人にも地球にもやさしい、サステナブルな素材です。

03

最大216通りの組み合わせから選べる

ジェルトロンのオーダーメイドマットレス


ジェルトロンマットレスは「頭部」「腰部」「脚部」の3分割構造で、体の部位によって硬さをお選びいただけます。 商品購入の際は、下記の方法で得た「頭部」「腰部」「脚部」各体の部位の硬さ番号を入力してください。

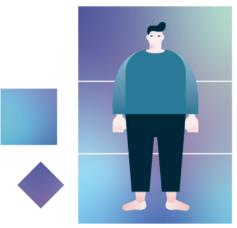







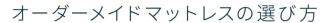


硬さの選び方1

e-MOSによる詳細選定

パシフィックウェーブWebサイトのe-MOSページに て体型データをご入力ください。216パターンの中 から最適な硬さの組み合わせを選定します。 https://pacificwave.co.jp/order/



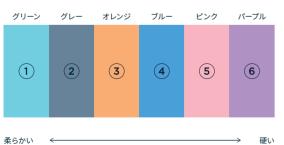

硬さの選び方2

BMI値による簡易選定

BMI値(体重kg÷身長m÷身長m)を算出してください。 算出された数値によって硬さの組み合わせをお選びください。

BMI値	ジェルトロンのかたさ	マットレス図
~14	頭部 ① 腰部 ① 脚部 ①	
14~17	頭部 1 腰部 2 脚部 1	
17~21	頭部 ② 腰部 ③ 脚部 ①	
21~25	頭部 3 腰部 4 脚部 2	
25~29	頭部 4 腰部 5 脚部 3	
29~	頭部 5 腰部 6 脚部 4	

パーツは交換可能! 硬さ変更も簡単

カバー・ジェルパーツ・ウレタン枠(キャビティ)の各パーツは買い替え可能です。

体型変化(体重の増減・妊娠)や商品の劣化等で、マットレスを変更したい場合でも、 各パーツで買い替えることができるため経済的。ジェルパーツの交換で違う硬さのマットレスにすることも可能です。

なぜ硬さの選択が必要?


体の部位によって、マットレスへの荷重割合が異なります。

立ち姿勢のまま軽く息を吐きリラックスしてみましょう。

そのまま横になった姿勢が、体に負担の少ない理想的な寝姿勢です。

ジェルトロンマットレスは、この理想的な寝姿勢を実現します。

全面が「柔らかい」マットレス

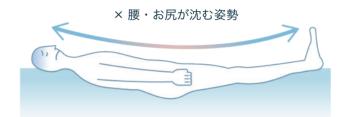


体圧分散性は良くなりますが、重い「腰・お尻」部分が落ち込み、 腰痛の原因となってしまいます。また、背中・横隔膜が圧迫され自 然に呼吸する力を低下させる要因となります。

全面が「硬い」マットレスの場合




仰向け時の腰お尻はしっかりと支えられる反面、「かかと」「肩甲骨」の圧迫が大きくなります。また、横向き時には「肩・腕」「腸骨・大転子」のしびれの原因となり、不要な寝返りが増えてしまいます。

体の部位の荷重割合に合わせた硬さを選ぶことで あなたに合った理想的な寝姿勢を実現しましょう。

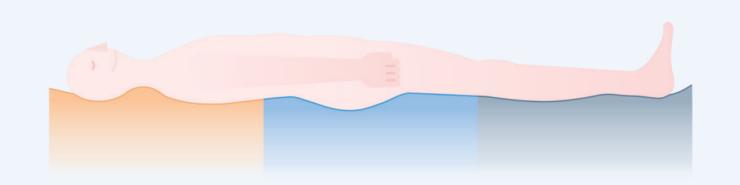



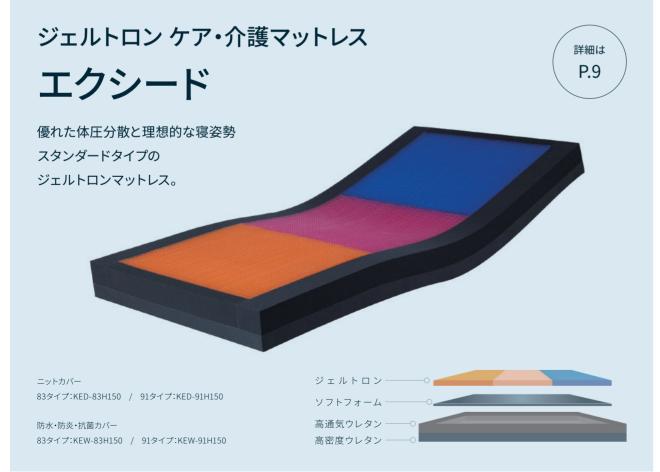

ジェルトロン ケア・介護マットレス スーパーエクシード









厚みの違う2種類のジェルを組み合わせた、 2段構造ジェルを使用した最高級のジェルトロンマットレス。

上段のジェルは肌当たりが優しくソフトな感触で、下段の ジェルは部位ごとに硬さを変えて寝姿勢を整えます。あら ゆる荷重や動きに対して柔軟に形状を変化させ、体への負 担を限りなく減らします。カバー生地には、柔らかく伸縮 性に優れた「テンセル™リヨセル繊維」を配合。フィット感 があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れて ※テンセル™は Lenzing AGの商標です。



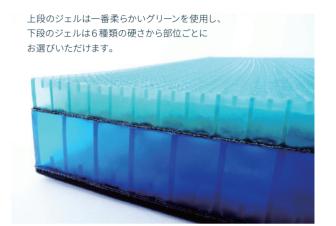




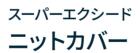

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	28
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	29

素材 マットレス ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン ポリエステル54%・再生繊維(テンセル™)33%・ ニットカバー ポリウレタン13%

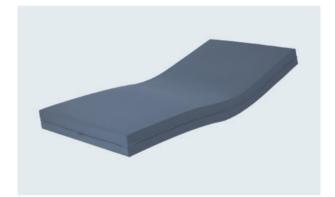

スーパーエクシード 防水・防炎・抗菌カバー

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	27
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	28
	素材	
マットレス	ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度	度ウレタン
防水·防炎·抗	菌カバー ポリエステル100%ポリウレタンフィル	LA

褥瘡ステージ	予防	ステージI	ステージⅡ	ステージIII	ステージIV
適応目安	0	\bigcirc		\circ	0



※ご注文時に P.5の「e-MOSによる詳細選定の結果」または「BMI値による簡易選定の結果」をお知らせください。

^{*}介護保険適用対象品/床ずれ防止用具

^{*}TAIS3-F:00839-000011

ジェルトロン ケア・介護マットレス エクシード











理想的な寝姿勢、優れた体圧分散性で、高水準の睡眠環境と床ずれ防止環境をつくりだす、 スタンダードタイプのジェルトロンマットレス

厚さ5cmのジェルを使用した、スタンダードタイプのジェ ルトロンマットレス。体の動きや体の凹凸に合わせて柔軟 に形状を変化させ、背中などの広い面積はゆるやかに、かか となどの突出した部分は深く沈み込むことで、マットレスと 体の隙間を減らし、睡眠に理想的な寝姿勢と体圧分散を実 現します。カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テン セル™リヨセル繊維」を配合。フィット感があり肌触りも良 く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。

※テンセル™は Lenzing AGの商標です。

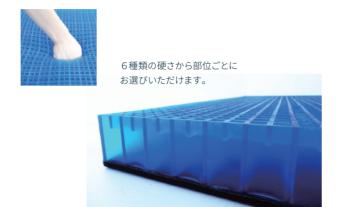


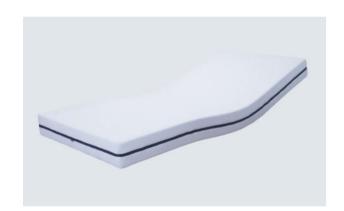

エクシード ニットカバー

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	21
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	22
	素材	

マットレス ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン ニットカバー ポリエステル54%・再生繊維(テンセル™)33%・ ポリウレタン13%

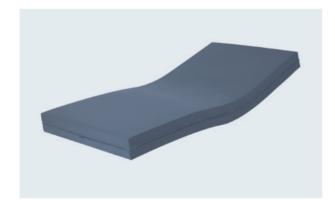

エクシード 防水・防炎・抗菌カバー

サイズ		寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅	83×長さ191×厚み15	20
91タイプ	幅	91×長さ191×厚み15	21
		素材	
マットレス		ジェルトロン・高通気ウレタン・高密	度ウレタン
防水•防炎•抗	菌カバー	ポリエステル100%ポリウレタンフィ	ルム





※ご注文時に P.5の「e-MOSによる詳細選定の結果」または「BMI値による簡易選定の結果」をお知らせください。

ジェルトロン

トップマットレス









今お使いの寝具の上に敷くだけで床ずれ防止効果をアップ 持ち運びもできるので様々なシーンで活用いただけます。

厚さ2cmの細かい格子のジェルトロンが身体を優しく支えま す。通気性にも優れており発汗などによる蒸れを減らしま す。あらゆる荷重、動きに対して柔軟に形状を変化させ、ず れやねじれの力も吸収するので体への負担を減らします。全 身用から部分用まであらゆる用途に対応し、汚れた場合に は、カバー・中身とも水洗いすることができ、衛生的にご使 用いただけます。





単体タイプ P-1 • P-2 • P-3

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
P-1	幅70×長さ60.5×厚み2.5	2.7
P-2	幅70×長さ121×厚み2.5	5.4
P-3	幅70×長さ181.5×厚み2.5	8.1

トップマットレス ジェルトロン・高通気ウレタン カバー(P-1・P-2) ポリエステル100% 表面:ポリエステル100% 底面:[防滑性トリコット]ポリエステル55%・

ポリウレタン45%[メッシュ]・ポリエステル100%



枠付きタイプ P-83 • P-91 • P-S

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
P-83	幅80×長さ191.5×厚み2.5	8.4
P-91	幅88×長さ191.5×厚み2.5	8.6
P-S	幅94×長さ191.5×厚み2.5	8.8
	素材	
トップマットレス	ジェルトロン・高通気ウレタン	

表面:ポリエステル100% カバー 底面:[防滑性トリコット]ポリエステル55%・ (P-83 • P-91 • P-S) ポリウレタン45%[メッシュ]・ポリエステル100%



通気性UP

立体格子内の空気が、 寝返りの際に入れ替 わることにより、発汗 等による蒸れを軽減 します。



体圧分散性UP

あらゆる荷重、動きに 対して柔軟に形状を 変化させ力を吸収し、 体への負担を減らしま す。



衛生性UP

汚れた場合には、カ バー中身ともに水洗い することができ、衛生 的にご使用いただけ ます。

*介護保険適用対象品/床ずれ防止用具

*TAIS=-1:00839-000002(P-3 • P-83 • P-91 • P-S)

*届出コード:00839-700003(P-1)

00839-Z00002(P-2) P-1:GTP-1 / P-2:GTP-2 / P-3:GTP-3 / P-83:GTP-SS / P-91:GTP-MS / P-S:GTP-S

^{*}介護保険適用対象品/床ずれ防止用具

^{*}TAIS = F:00839-000001



ジェルトロンピローの構造

高さ調整 高密度ウレタン


厚み8mmのウレタンの使用枚数により、 お好みの高さに調整できます

サイドアップパーツ 高通気ウレタン


まくら中央部と左右部の高さを変えること ができ、仰向き・横向き寝にも対応

中央部ジェルトロン

取り外し可能で、保冷剤を入れることがで きます $(Z-\mathcal{N}-LOW\alpha/Z-\mathcal{N}-II\alphaのみ)$

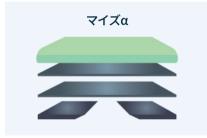



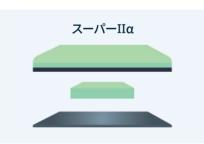



重さではなく「形」にフィット

突起部分でも包み込むように柔軟にフィットするため、カテーテ ルや補聴器をつけたままでも局部にかかる圧を吸収し、皮膚への 負担を軽減します。床ずれ対策や傷口保護として医療、介護の 現場でも活躍しています。



ニットカバー

カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル™リヨセル繊 維」を配合。フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・ 速乾性にも優れています。

※テンセル™は Lenzing AGの商標です。

ジェルトロンピロー

マイズ α





3層一体成型ジェルトロンを使用した、 最高峰のまくら。

まくら全体が厚さ5.5cmのジェルトロン。仰向き寝の 頚椎から頭部にかけてはもちろん、横向き時の耳、頬 も包み込むように優しく支えます。



ONLINE SHOP

サイズ (cm)	重量(kg)		素材	
幅60×奥行33×高さ	3.3	ピロー	ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン	
(中央部5.5~7.5、左右部5.5~9.5)	5.5	カバー	ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ ポリウレタン13%	

ジェルトロンピロー スーパーLOWa

高さ調整範囲

中央部4.5~5.5cm

左右部4.5~7.5cm



低め



ジェルトロンピロー スーパーIIa





やや低め~標準 高さ調整範囲 6.5~7.5cm

表面に厚さ2cmのジェルを使用し、内部中央部分には厚さ2cm のジェルを使用。低いまくらを好まれる方やストレートネック の方にもお勧めです。内部ジェルの代わりに保冷材等を入れる ことが可能で、ひんやりご使用いただけます。

サイズ(cm) 重量(kg) 幅60×奥行32×高さ 2.0 (中央部4.5~5.5、左右部4.5~7.5)

素材

ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%

ONLINE SHOP

表面に厚さ2cmのジェルを使用し、内部中央部分には厚さ 4.5cmのジェルを使用。2cmのジェルとウレタンで頚椎をしっ かり支えます。内部ジェルの代わりに保冷材等を入れることが 可能で、ひんやりご使用いただけます。

ONLINE SHOP

重量(kg) サイズ(cm) 幅60×奥行32×高さ6.5~7.5

ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン


ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%

ジェルトロンピロー ムーブ

コンパクトで持ち運びしやすいサイズのまくら。

ピロー ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン

厚さ4.5cmのジェルを使用し、小さいながらもクッション性があり圧力 吸収に優れています。ミニクッションやヘッドレスト用としてもご使用 いただけます。

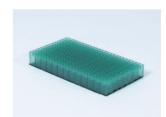




サイズ (cm)	重量(g)		素材
幅33×奥行18×高さ4.5	800	ピロー	ジェルトロン
		カバー	ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%

ONLINE SHOP

クッション

優れた体圧分散性とずれ吸収力で、臀部への負担、姿勢の崩れを減らします。 デスクワーク、車での移動、車椅子など座る時間の長いシーンにおすすめ。 振動吸収性に優れているので、振動による体への負担も軽減します。



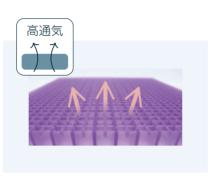

座骨の局部圧を軽減

ジェルトロンが骨突出部分にかかる局 部的圧力を吸収し、臀部全体をバラン スよく支え、しびれや痛み、不快感を 軽減します。

前ずれも吸収

ジェルトロンは斜め方向の荷重も吸収 し、仙骨座り等姿勢の崩れを防ぎま

蒸れずに快適

ジェルトロンは立体格子内に空気層を 多く含み、使用することで空気の入れ 替えを行います。汗による蒸れ等を無 くし気持ちよくお使いいただけます。



衝撃・振動を吸収して快適

ジェルトロンは衝撃・振動吸収性に優 れ、車椅子走行中の前ずれや衝撃、振 動による体への負担を軽減します。




洗えて衛生的

ジェルトロンクッションは本体・カ バーとも洗っていただくことができ、 衛生的にご使用いただけます。

各クッション比較

ジェルトロンクッションには多数のラインナップがございます。

ご使用者さまの状態や使用環境に合ったクッションをお選びいただくことで、快適な座位環境を作り出すことができます。

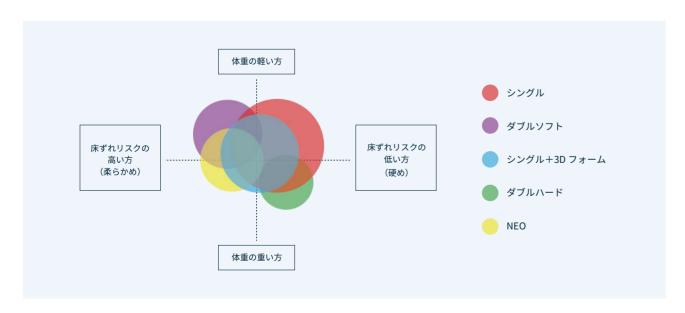

ジェルトロン クッション シングル

厚さ3cmのジェルトロンを使った 車椅子クッションの定番。

立ち上がり、足こぎもしやすく汎用性が高いクッションです。 食卓椅子や座椅子、車での移動など、長時間のご使用にもおすすめです。 水洗いも可能で衛生的にご使用いただけます。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ	幅38×奥行38×厚み3.5	1.4
42タイプ	幅42×奥行38×厚み3.5	1.6
	素材	
クッション	ジェルトロン	
カバー	座面:ポリエステル100% 側面:ポリエステル100% 底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)	
	点面・1 VC-NO113100 /6 (肩9正の)加工/	ONLINE SHOP
*介護保険適用福祉用	1具/車椅子付属品	回线护国

- *TAIS = F:[38]00839-000004
- *TAIS = F: [42]00839-000022 シングル38:GTC1S / シングル42:GTC1M





ジェルトロン クッション シングル+3Dフォーム

厚さ3cmのジェルトロンと、高密度3Dフォームを 組み合わせた構造で、座位の安定性、 体圧分散性に優れたクッションです。


臀部の形状に合わせたフォームとジェルトロンの組み合わせで、 前後のずれを減らし、安定性を高めました。

接触面積を広げ体圧分散し、長時間の使用でもバランス良く安定した座 位を保持できるようサポートします。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ 42タイプ	幅38×奥行38×厚み6.5 幅42×奥行38×厚み6.5	1.5 1.7
	素材	
クッション カバー	ジェルトロン・高密度ウレタン 座面:ポリエステル100% 側面:ポリエステル100% 底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)	ONLINE SHOP
*介護保険適用福祉用		

- *介護保障適用福祉用旦/車椅子付属品
- *TAIS = F:[38]00839-000010
- *TAIS = F:[42]00839-000023

シングル+3Dフォーム38:GTC1S3D / シングル+3Dフォーム42:GTC1M3D

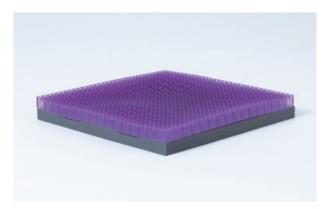



ジェルトロン クッション

ダブルソフト

2種類のジェルトロンで やさしく支える2段構造クッション。

しっかりとした硬さのある厚さ3cmのジェルトロンと、ソフトな感触の ジェルトロンパーツ(厚さ2cmジェルトロン+厚さ1.5cm高通気ウレタ ン)を組み合わせた2段構造タイプ。振動や蒸れの軽減はもちろん、臀 部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションで す。座位時間が長く、床ずれリスクが高い方におすすめです。カバーに は伸縮性に優れたスーパーニット生地を使用しています。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ 40タイプ	幅38×奥行38×厚み6.5 幅40×奥行38×厚み6.5	2.3 2.4
	素材	
クッション カバー	ジェルトロン・高通気ウレタン 座面: ナイロン84%・ポリウレタン16% 側面: ポリエステル100% 底面: PVC-RoHS100% (滑り止め)	ONLINE SHOP

*介護保険適用福祉用具/車椅子付属品

*TAIS¬-F:[38]00839-000003

*TAIS¬-F:[40]00839-000029

ダブルソフト38:GTC2SS / ダブルソフト40:GTC2-40S







ジェルトロン クッション ダブルハード

2種類のジェルトロンで しっかり支える2段構造クッション。

しっかりとした硬さのある厚さ3cmのジェルトロンを2枚重ねた2段構造 タイプ。振動吸収性や蒸れの軽減に優れ、臀部・仙骨部への圧迫を最大 限に抑えることを大切に考えたクッションです。体重の重い方で、しっ かりとしたクッション性を必要とされる方におすすめです。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ	幅38×奥行38×厚み6.5	2.6
42タイプ	幅42×奥行38×厚み6.5	2.9
	素材	
クッション	ジェルトロン	
カバー	座面: ポリエステル100% 側面: ポリエステル100% 底面: PVC-RoHS100% (滑り止め加工)	
		ONLINE CHOD

*介護保険適用福祉用具/車椅子付属品 *TAIS¬-F:[38]00839-000005

ダブルハード38:GTC2SH / ダブルハード42:GTC2MH





ジェルトロン クッション

NEO (**)


バランスをとりやすい 独自のジェルトロン2層構造クッション。

上部に厚さ2cmのソフトタイプと、座骨部分の下に厚さ3cmのジェルト ロンを組み込んだ仕様。座骨部分がダブルジェル構造となり、除圧効果 をアップし、大腿部での左右の体幹バランスもとりやすい構造です。姿 勢の前ずれを軽減し、お尻の位置の安定性を高めます。

	寸法(cm)	重量(kg)
幅3	9×奥行38×厚み5.5	1.5
	素材	
クッション	ジェルトロン・高密度ウレタン	
カバー	座面:ポリエステル100% 側面:ポリエステル100% 底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)	ONLINE SHOP

*介護保険適用福祉用具/車椅子付属品 *TAIS=-F:00839-000020 NEO:GTC-NEO



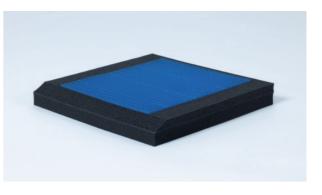





薄型軽量で持ち運びに便利。 車椅子の背当てにも。

厚さ2cmの薄型ジェルトロンを、蒸れの発散性に優れた高通気ウレタン で挟んだクッションです。座面はもちろん、車椅子の背当て用としても ご使用いただけます。薄型で軽量なので、持ち運びにもおすすめです。 二つ折りでのご使用も可能です。

	寸法(cm)	重量(kg)
幅42	2 × 奥行42 × 厚み3.5	0.7
	素材	
クッション	ジェルトロン・高通気ウレタン	

座面:ポリエステル100% 底面:ポリエステル100%(滑り止め)

*介護保険適用福祉用具/車椅子付属品

*TAISコード:00839-000007

ブリーズ:GTC-B



軽量小型で持ち運びに便利なクッション。 車椅子の背当て用として。

厚さ1cmの薄型ジェルトロンを、蒸れの発散性に優れた高通気ウレタン で挟んだクッションです。2つ折りでA4サイズになり軽量かつ持ち運び しやすいため、スポーツ観戦や映画鑑賞時、旅行の際の移動時など、使 用する場所を選ばない機能的なクッションです。車椅子の背当てクッシ ョンとしてもご使用いただけます。

	寸法(cm)	重量(kg)
幅4	4×奥行30×厚み2.5	0.5
	素材	
クッション	ジェルトロン・高通気ウレタン	
カバー	座面:ポリエステル100% 底面:ポリエステル100%(滑り止め)	ONLINE SHOP
*介護保険適用福祉月 *TAISコード:00839- ブリーズムーブ:GTC-B	000024	

ジェルトロン


体位変換クッション

側臥位保持・体位変換のサポートに。

適度な硬さのウレタンで30度保持がしやすい体位変換サポート クッションです。体を支える面に厚さ2cmの薄型ジェルトロン を使用し、側臥位時のずれを吸収。オムツ交換時や車椅子での 姿勢保持にもお使いいただけます。



▲ サイズは標準とロングの2タイプ

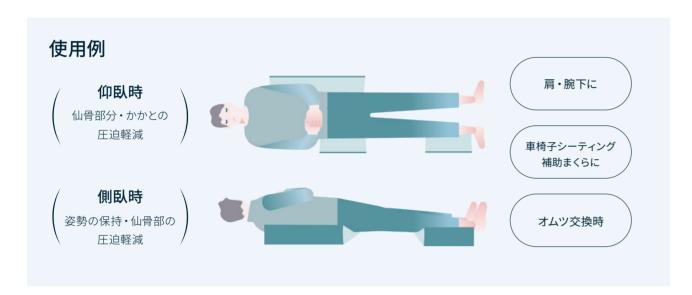

カバーには汗や水分による蒸れを軽減する「高通気カバー」と、 汚れがしみ込まずサッと拭き取れる「防水清拭カバー」の2タイプがあります。



サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
標準タイプ ロングタイプ	幅35×奥行21×高さ12 幅70×奥行21×高さ12	0.6 1.2
	素材	
クッション 高通気カバー	ジェルトロン・高通気ウレタン 表面:ポリエステル90%・綿10% 底面:ポリエステル100%	

- *介護保険適応福祉用具/体位変換器
- *TAISコード:[ロング]00839-000028



サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
標準タイプ	幅 3 5 × 奥 行 2 1 × 高 さ 1 2	0.6
ロングタイプ	幅70×奥行21×高さ12	1.2
	素材	
クッション	ジェルトロン・高通気ウレタン	
防水清拭カバー	ポリエステル100%	
	ポリウレタンフィルム	

ONLINE SHOP

ジェルトロン ベビーまくら

baby fit (KE-71491)

サイズの調整が可能で、座位保持装置やバギーの ヘッドレストとしても更にご使用しやすくなりました。 頭部や耳などの局部の除圧にも使用可能で、 医療・介護の現場でもご使用いただけます。







ONLINE SHOP

サイズ(cm)	重量(g)	素材
幅21.5~25.5×奥行24×高さ3	160	ピロー ジェルトロン・高通気ウレタン
		カバー ポリエステル100%(面ファスナー:ナイロン100%)



ジェルトロン ベビーまくら

Child fit (Frank 774 y h)

まくら底面フォームにくぼみを持たせ、 頭部を安定、座位保持装置や バギーのヘッドレストとしてもご使用が可能です。 使用しやすい薄さで、医療・介護の現場でも 活躍しています。



後頭部にフィットするように中央部を ▶ 円形状にカットしたベースウレタンが付属





サイズ(cm)	重量(g)	素材
幅37×奥行23×高さ4	500	ピロージェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン
		カバー オーガーックコットン100%



ショルダーパッド(スタンダードタイプ)

バッグの重さや蒸れが軽減されるジェルトロンショルダーパッド。 バッグに取り付けることで肩からのずり落ちを防ぎ、肩への負担を軽減します。

サイズ	寸法(cm) ※()内は取付時のサイズ		重量(g)
S	幅15(5)×長さ17.5×厚み1.5	対応ベルト幅:最大4.5cm	50
М	幅17.5(6) ×長さ22×厚み1.5	対応ベルト幅:最大5.5cm	80
L	幅23(9)×長さ25.5×厚み1.5	対応ベルト幅:最大8.5cm	130

中身:ジェルトロン 表面:ナイロン100% (表面生地裏側) ウレタンコーテイング 内面:ポリエステル65%・コットン35%

底面:ポリエステル/ポリウレタン(滑り止め)





*TAISコード:[標準]00839-000013

標準タイプ・高通気カバー仕様:GTC-TH 標準タイプ・防水清拭カバー仕様:GTC-THB ロングタイプ・高通気カバー仕様:GTC-THL ロングタイプ・防水清拭カバー仕様:GTC-THLB