


ジェルترون ケア カタログ

CARE Catalog

ケア・介護

販売店



製造・販売元



〒624-0823 京都府舞鶴市京田187-1

TEL 0773-75-8688 FAX 0773-78-9035

MAIL geltron@geltron.jp



株式会社パシフィックウェーブWebサイト
<https://pacificwave.co.jp>

ジェルترون
公式オンラインショップ




<https://geltron.jp/>

製品保証規定



<https://geltron.jp/?mode=f2>

- 商品サイズは加工工程により多少の差が生じる場合があります。
- 製品改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

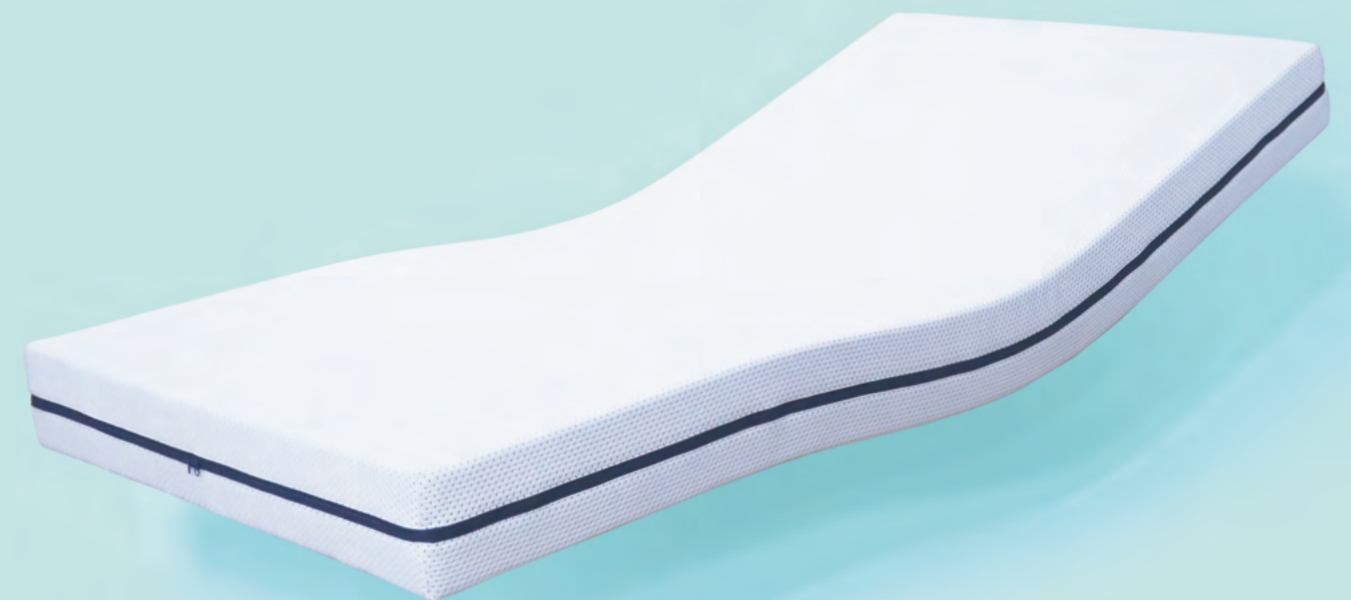

ジェルトロンは
「人を想う」ものづくりから生まれています。

製品を使っていただくことで、お客様のお困りごとに寄り添いたい。

良きパートナーとして末長く愛用していただきたい。

「出かけるのが楽しみになった」「眠るのが楽しみになった」と感じてほしい。

そんな願いを込めながら、お客様の喜ばれる姿を思い描き、


立体形状ジェルのパイオニアとして

常に信頼されるものづくりをしていきたいと考えています。

人の手だからこそできるものづくりで、ジェルトロンの製品は生まれています。

仕方がないとあきらめていませんか？
ジェルトロンだからこそ
できることがあります。

お客様の声は
こちらから
ご覧いただけます

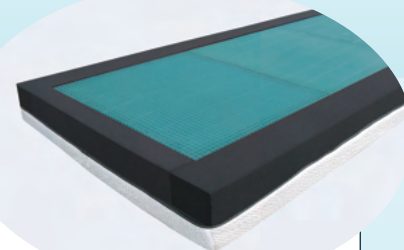

リラックスして ゆったりと眠ってほしい

ジェルトロンマットレスは、床ずれの防止に必要な体圧分散性と、皮膚にかかる負荷を軽減するずれ吸収性に優れています。また眠る時の最適な姿勢を整えるため、ご使用される方の体格に合わせた硬さに設定することが可能です。床ずれ防止環境と、快適な睡眠環境を両立させた、心地よく眠れるマットレスです。

マットレスはP. 7～

マットレスを活用した
床ずれ治癒事例
[写真あり]




包み込まれる安心感の中で 眠ってほしい

ジェルトロンピローは頸椎から頭部の形に添ってぴったりとフィットすることで局部にかかる圧を吸収し、傷口もやさしく包み込みます。横向き寝の耳や頬もやさしく支え、リラックスしておやすみいただけます。通気性に優れ、蒸れや熱をため込まず、水洗いも可能です。

ピローはP. 11～

まくらを活用した
床ずれ治癒事例
[写真あり]

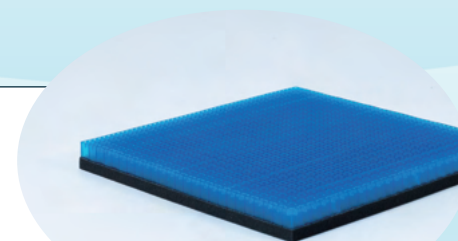

痛みなくおだやかに 過ごしてほしい


ジェルトロンクッションは、ジェルが形状を変えながら臀部を包み込むことで、座骨など骨突出部分への負担が減り痛みを和らげます。また、振動吸収性があり、車椅子で移動するときも姿勢の崩れや振動によるからだへの負担を減らすことができます。通気性にも優れ蒸れにくく、気持ちよくお使いいただけます。

クッションはP. 13～



ジェルترونとは

睡眠時の体への負荷を取り除くために開発された、多層立体形状ジェルで、マットレスやまくら、クッションなどに使用されています。グミキャンディのような感触で、体の凸凹や動きに柔軟になじみながら、睡眠を阻害するあらゆる負担をカット。まるで水の中に包まれているような浮遊感で、良質な睡眠へ導きます。その素材の特性から、様々な用途に活用されています。

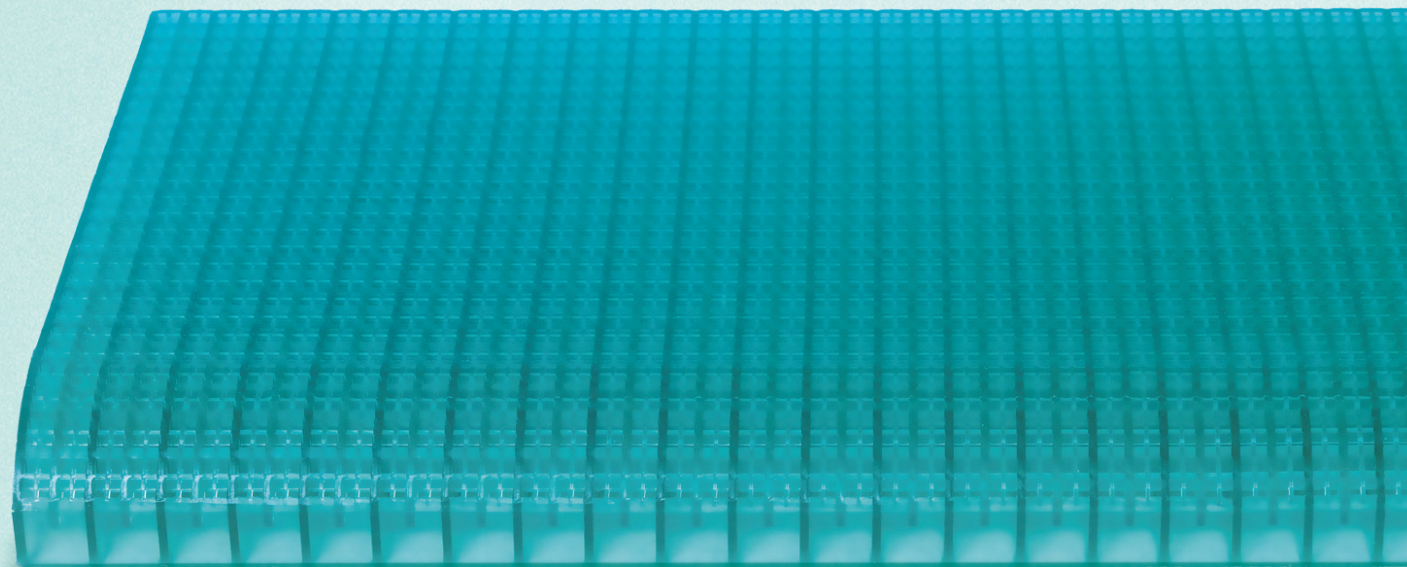

快適な寝ごこち

（ 床ずれが心配
眠りが浅い
寝姿勢が不安定 ）

体の凸凹に合わせ、柔軟に形状を変化させることで、睡眠中の体にかかる余分な負荷を軽減します。局所的な圧迫を分散しつつ、広い面積ではしっかりと支えることで寝姿勢を安定させ、常に快適でリラックスできる寝心地をキープ。床ずれ防止環境を整えます。



血行不良の軽減

（ からだの痛み、しびれ ）

垂直にかかる重さはもちろん、ずれ・ねじれなど、多方向からの圧力も吸収し、血行障害を防ぎます。肌と接している素材が、体の形や動きに応じて柔軟に動くことで、包み込むようにやさしく体を支えます。



優れた耐久性

（ 長く使えるか心配 ）


8万回の繰り返し圧縮テストでは、復元率99.6%以上を記録。ウレタン素材の約3～5倍の耐久性を持ち、長年繰り返し使っても歪みが小さく、形状安定性にも優れていることが証明されています。また温度によって硬さが変わることもほとんどないため、季節を問わず安定した使い心地です。



蒸れずに快適

（ 汗による不快感 ）

ジェルترونは空気の層を多く含み、立体形状ジェルの変形時に中の空気が入れ替わる仕組みになっています。ジェルの壁が体重で潰れるたび、蒸れた空気を排出して新しい空気を取り込むので、常に通気性抜群。発汗などによる湿潤を減らし、四季を通して快適な使用感を実現します。

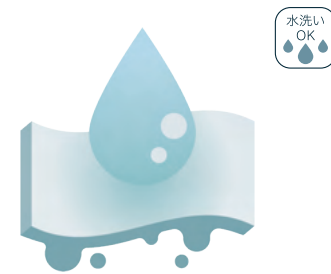

水洗いOK

（ 衛生的に使いたい ）

ジェルترونは水洗いOK。ファスナー式の製品カバーを外したあと、汚れた部分を取り外しご家庭でお手入れすることができます。長年使用による汚れや臭いがついた場合にはもちろん、不意に汚れた場合にも簡単スッキリ。衛生的にご使用いただけます。



人と地球にやさしい

（ ジェル素材って
安心なの？ ）

素材には米国食品医薬品局（FDA）が認可したミネラルオイルとポリマーを使用。アレルギー誘発性がなく、ダニ、カビの温床にもならないため、赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使いいただけます。また環境汚染物質も含まれておらず、リサイクル可能。人にも地球にもやさしい、サステナブルな素材です。

「床ずれ防止」と「快適な睡眠」を両立させる ジェルترون ケア・介護マットレス

マットレスの選定において、床ずれ防止さえ出来れば、それで良いのでしょうか？
長時間ベッド上で過ごされる方のマットレスであれば「寝ごち」の良さも大切です。
睡眠の質の低下は、体力減少、免疫機能の低下等、様々な弊害をもたらします。
床ずれ防止マットレスは除圧だけでなく、「眠る」ための機能も重要視しましょう。

全面が「柔らかい」マットレスの場合

(エアーマットレス、床ずれ防止マットレスでの主な寝姿勢)




体圧分散性のみを重視した床ずれ防止マットレス、エアーマットレス等は、荷重割合の高い「腰・お尻」部分の落ち込みが大きくなりがちです。「腰・お尻」が落ち込んだ寝姿勢は、腰に負担をかけるだけでなく、胸部・背中・腹部にかけての負担が大きくなり、横隔膜への圧迫が増え、自然に呼吸する力を低下させる恐れがあります。また通気性の悪さ、電動音等、「眠る」環境として良いとは言えず、睡眠の質の悪化により体力・免疫機能が低下する可能性があります。

全面が「硬い」マットレスの場合




仰向け時には「腰・お尻」はしっかりと支えられる反面、「かかと」「肩甲骨」の圧迫が大きくなります。また、横向き時には、「肩・腕」「腸骨・大転子」のしびれの原因となり、不要な寝返り(体動)が増えるため、睡眠の質が低下する恐れがあります。

最適な寝姿勢とは？

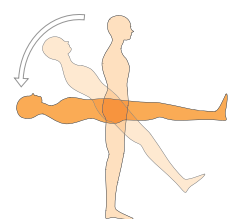


息を吐いてリラックスした立ち姿勢をそのまま横にした姿勢が、体に負担の少ない理想的な寝姿勢です。

マットレスへの荷重割合は、体の部位によって異なります

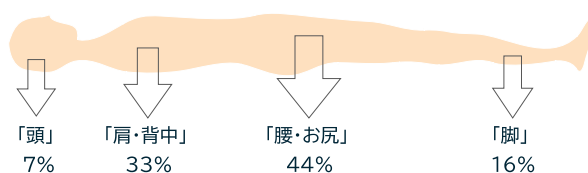

ジェルترونマットレスは、快適な寝姿勢を保持するために、体の部位の荷重割合に合わせて6種類の硬さの中からジェルパーツを選定し、各ポジションにセッティングすることで最適な硬さのマットレスに設定することができます。

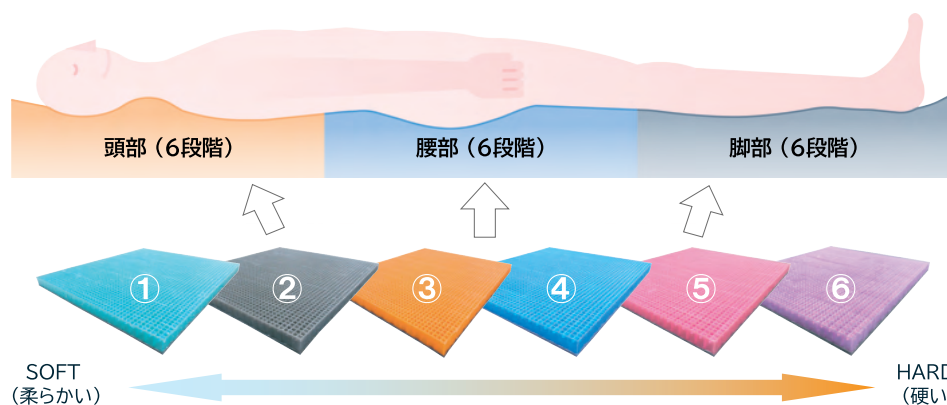

業界初
マットレス
オーダーメイドシステム
「e-MOS」
(e-Mattress Ordermade System)

体に負担の少ないリラックス寝姿勢を生み出す マットレス オーダーメイドシステム「e-MOS」

ジェルترونマットレスは、床ずれ防止に必要な体圧分散性、ずれ・ねじれ吸収機能に優れているだけでなく、「眠る」ための快適な寝姿勢を保持出来るように、「頭・肩」「腰・お尻」「脚」の硬さを使用される方の体格に合わせて設定。自然呼吸を妨げず、身体に負担の無い快適な寝姿勢を生み出します。
長い時間、体をあずけるマットレスだから、より自分に合った硬さのマットレスをお選びください。

オーダーメイドマットレスの選び方

硬さの選び方 1

e-MOSによる詳細選定

パシフィックウェーブWebサイトのe-MOSページにて体型データをご入力ください。

216パターンの中から最適な硬さの組み合わせを選定します。 <https://pacificwave.co.jp/order/>



硬さの選び方 2

BMI値による簡易選定

BMI値(体重kg÷身長m÷身長m)を算出してください。

算出された数値によって硬さの組み合わせをお選びください。

BMI値	ジェルترونパーツのかたさ	組み合わせ図
～14	頭部 ① 腰部 ① 脚部 ①	
14～17	頭部 ① 腰部 ② 脚部 ①	
17～21	頭部 ② 腰部 ③ 脚部 ①	
21～25	頭部 ③ 腰部 ④ 脚部 ②	
25～29	頭部 ④ 腰部 ⑤ 脚部 ③	
29～	頭部 ⑤ 腰部 ⑥ 脚部 ④	


パーツは交換可能！
硬さ変更も簡単

カバー・ジェルパーツ・ウレタン枠(キャビティ)の各パーツは買い替え可能です。

体型変化(体重の増減)や商品の劣化等で、マットレスを変更したい場合でも、各パーツで買い替えることができるため経済的。ジェルパーツの交換のみで、違う硬さのマットレスにすることも可能です。

ジェルトロン ケア・介護マットレス スーパーエクシード

体にかかる負担を限りなく「ゼロ」に
最高級のジェルトロンマットレス

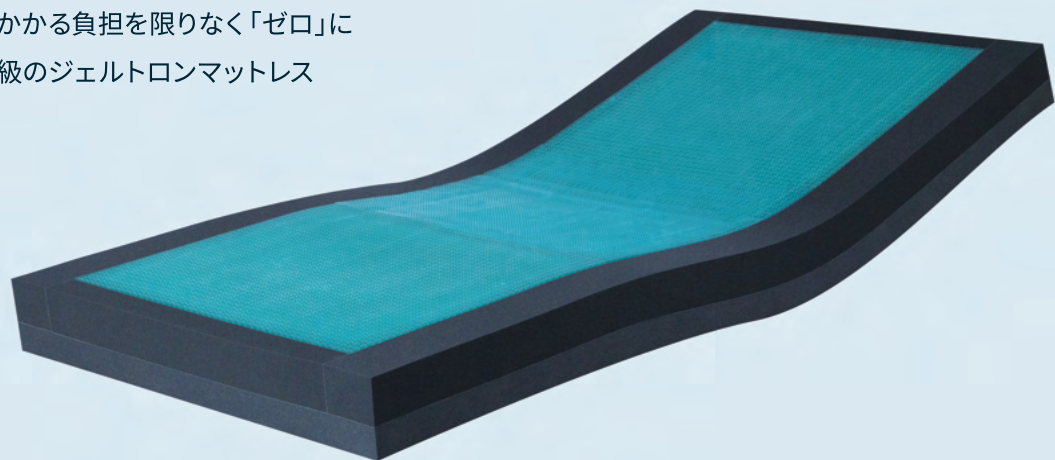


ニットカバー
83タイプ:KLD-83H150 / 91タイプ:KLD-91H150

防水・防災・抗菌カバー
83タイプ:KLW-83H150 / 91タイプ:KLW-91H150

ジェルトロン
ソフトフォーム
高通気ウレタン
高密度ウレタン

ジェルトロン ケア・介護マットレス エクシード

優れた体圧分散と理想的な寝姿勢
スタンダードタイプの
ジェルトロンマットレス

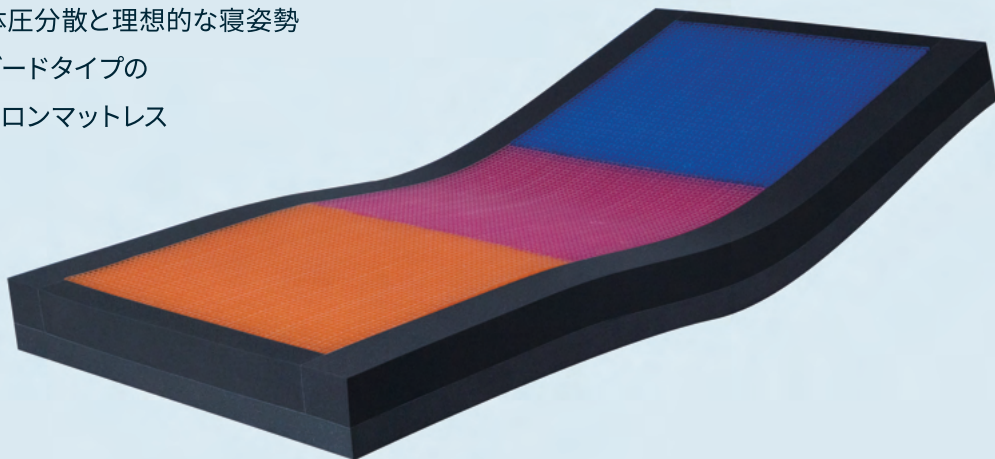

ニットカバー
83タイプ:KED-83H150 / 91タイプ:KED-91H150

防水・防災・抗菌カバー
83タイプ:KEW-83H150 / 91タイプ:KEW-91H150

ジェルトロン
ソフトフォーム
高通気ウレタン
高密度ウレタン

詳細は
P.8

詳細は
P.9

ジェルトロン ケア・介護マットレス スーパーエクシード

厚みの違う2種類のジェルを組み合わせ、
2段構造ジェルを使用した最高級のジェルトロンマットレス。




上段のジェルは肌当たりが優しくソフトな感触で、下段のジェルは部位ごとに硬さを変えて寝姿勢を整えます。あらゆる荷重や動きに対して柔軟に形状を変化させ、体への負担を限りなく減らします。カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル™リヨセル繊維」を配合。フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。

※テンセル™は Lenzing AGの商標です。

マットレスを活用した
床ずれ治癒事例
[写真あり]



上段のジェルは一番柔らかいグリーンを使用し、
下段のジェルは6種類の硬さから部位ごと
にお選びいただけます。

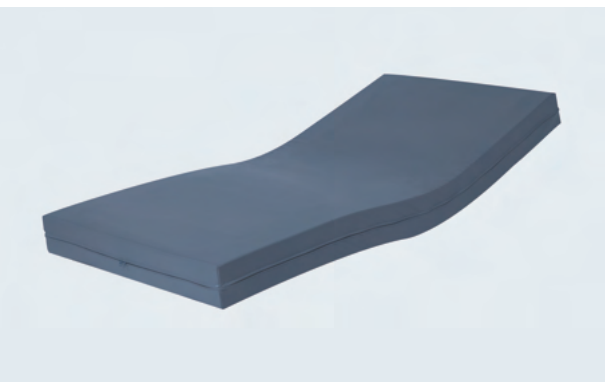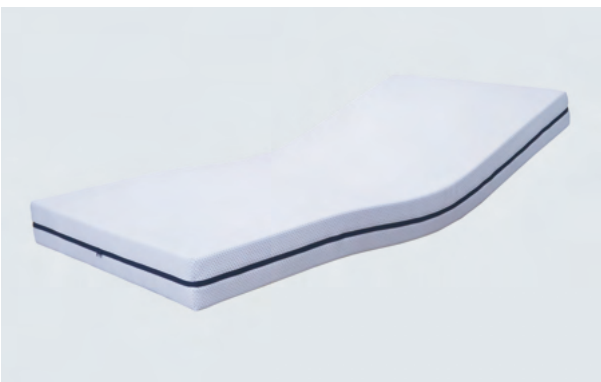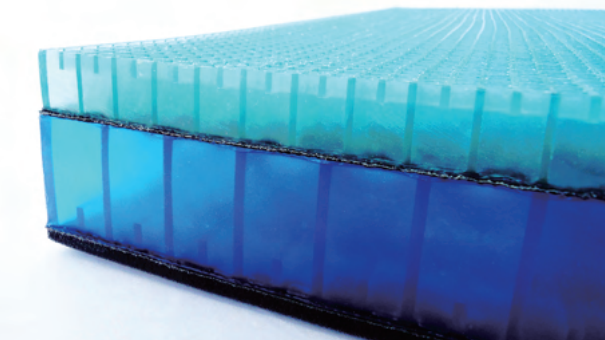

スーパーエクシード ニットカバー

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	28
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	29

素材	
マットレス	ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン
ニットカバー	ポリエステル54%・再生繊維(テンセル™)33%・ポリウレタン13%

スーパーエクシード 防水・防災・抗菌カバー

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	27
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	28

素材	
マットレス	ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン
防水・防災・抗菌カバー	ポリエステル100%ポリウレタンフィルム

褥瘡ステージ 適応目安	予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
	○	○	○	○	○

*介護保険適用対象品／床ずれ防止用具

*TAISコード:00839-000011

※ご注文時に P.5の「e-MOSIによる詳細選定の結果」または「BMI値による簡易選定の結果」をお知らせください。

ONLINE SHOP




ジェルトロン ケア・介護マットレス
 エクシード





理想的な寝姿勢、優れた体圧分散性で、高水準の睡眠環境と床ずれ防止環境をつくりだす、スタンダードタイプのジェルトロンマットレス

厚さ5cmのジェルを使用した、スタンダードタイプのジェルトロンマットレス。体の動きや体の凹凸に合わせて柔軟に形状を変化させ、背中などの広い面積はゆるやかに、かかとなどの突出した部分は深く沈み込むことで、マットレスと体の隙間を減らし、睡眠に理想的な寝姿勢と体圧分散を実現します。カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル™リヨセル繊維」を配合。フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。

※テンセル™は Lenzing AGの商標です。

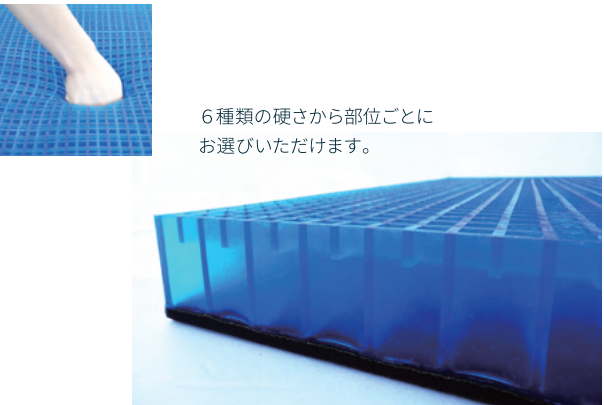

6種類の硬さから部位ごとにお選びいただけます。

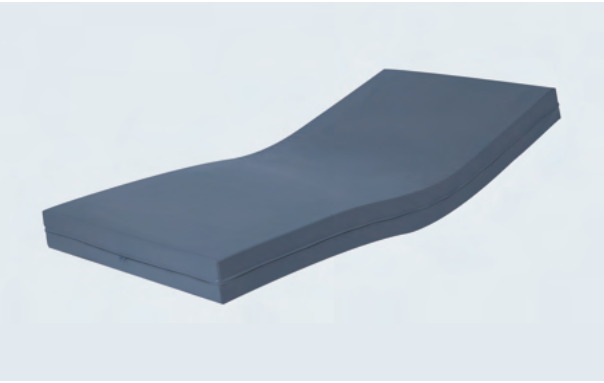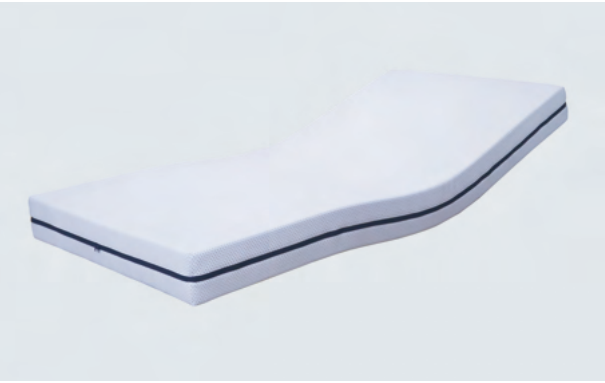

エクシード
 ニットカバー

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	21
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	22

素材
マットレス ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン
ニットカバー ポリエステル54%・再生繊維(テンセル™)33%・ポリウレタン13%

エクシード
 防水・防災・抗菌カバー

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
83タイプ	幅83×長さ191×厚み15	20
91タイプ	幅91×長さ191×厚み15	21

素材
マットレス ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン
防水・防災・抗菌カバー ポリエステル100%ポリウレタンフィルム

褥瘡ステージ 適応目安	予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
	○	○	○	○	△

＊介護保険適用対象品／床ずれ防止用具
 ＊TAISコード：00839-000001





※ご注文時に P.5の「e-MOSによる詳細選定の結果」または「BMI値による簡易選定の結果」をお知らせください。

ジェルトロン
 トップマットレス



今お使いの寝具の上に敷くだけで床ずれ防止効果をアップ。持ち運びもできるので様々なシーンで活用いただけます。


厚さ2cmの細かい格子のジェルトロンが身体を優しく支えます。通気性にも優れており発汗などによる蒸れを減らします。あらゆる荷重、動きに対して柔軟に形状を変化させ、ずれやねじれ之力も吸収するので体への負担を減らします。全身用から部分用まであらゆる用途に対応し、汚れた場合には、カバー・中身とも水洗いすることができ、衛生的にご使用いただけます。

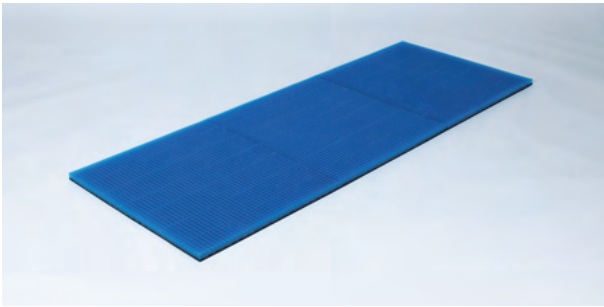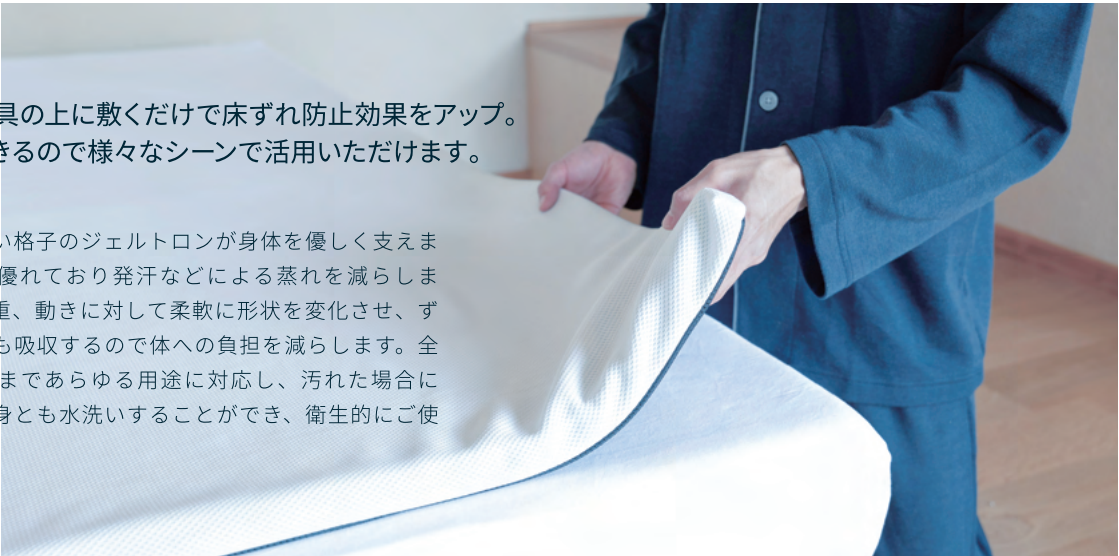

単体タイプ P-1・P-2・P-3

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
P-1	幅70×長さ60.5×厚み2.5	2.7
P-2	幅70×長さ121×厚み2.5	5.4
P-3	幅70×長さ181.5×厚み2.5	8.1


素材
トップマットレス ジェルトロン・高通気ウレタン
カバー (P-1・P-2) ポリエステル100%
カバー (P-3) 表面：ポリエステル100% 底面：[防滑性トリコット]ポリエステル55%・ポリウレタン45%[メッシュ]・ポリエステル100%

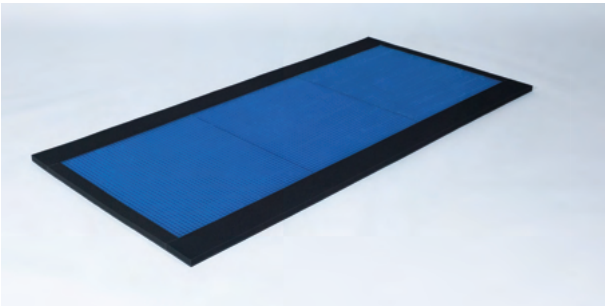

枠付きタイプ P-83・P-91・P-S

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
P-83	幅80×長さ191.5×厚み2.5	8.4
P-91	幅88×長さ191.5×厚み2.5	8.6
P-S	幅94×長さ191.5×厚み2.5	8.8

素材
トップマットレス ジェルトロン・高通気ウレタン
カバー (P-83・P-91・P-S) 表面：ポリエステル100% 底面：[防滑性トリコット]ポリエステル55%・ポリウレタン45%[メッシュ]・ポリエステル100%

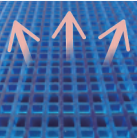
通気性UP
 立体格子内の空気が、寝返りの際に入れ替わることにより、発汗等による蒸れを軽減します。


体圧分散性UP
 あらゆる荷重、動きに対して柔軟に形状を変化させ力を吸収し、体への負担を減らします。


衛生性UP
 汚れた場合には、カバー中身ともに水洗いすることができ、衛生的にご使用いただけます。

＊介護保険適用対象品／床ずれ防止用具
 ＊TAISコード：00839-000002 (P-3・P-83・P-91・P-S)

＊届出コード：00839-Z00003 (P-1) 00839-Z00002 (P-2) P-1:GTP-1 / P-2:GTP-2 / P-3:GTP-3 / P-83:GTP-SS / P-91:GTP-MS / P-S:GTP-S







ピロー

床ずれ対策や傷口保護として
医療、介護の現場でも活躍しています。



ジェルトロンピローの構造

高さ調整 高密度ウレタン	サイドアップパーツ 高通気ウレタン	中央部ジェルトロン
厚み8mmのウレタンの使用枚数により、 お好みの高さに調整できます	まくら中央部と左右部の高さを変えること ができ、仰向き・横向き寝にも対応	取り外し可能で、保冷剤を入れることがで きます(スーパーLOWα / スーパーIIαのみ)

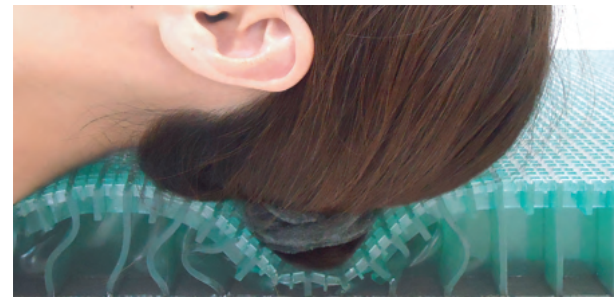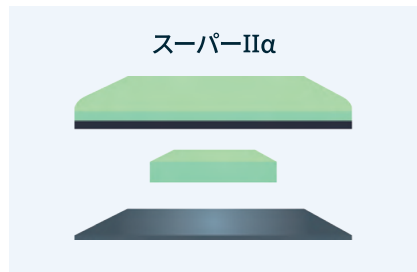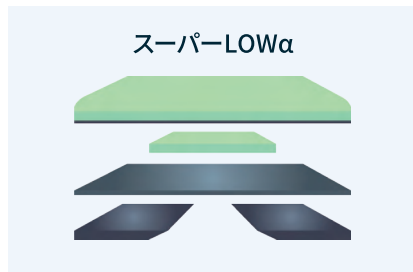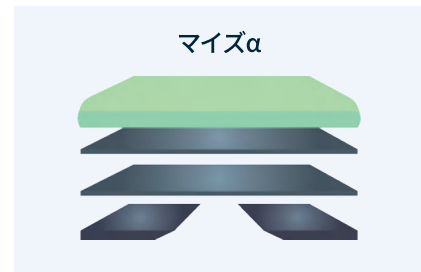

重さではなく「形」にフィット

突起部分でも包み込むように柔軟にフィットするため、カテーテルや補聴器をつけたままでも局部にかかる圧を吸収し、皮膚への負担を軽減します。床ずれ対策や傷口保護として医療、介護の現場でも活躍しています。



ニットカバー

カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル™リヨセル繊維」を配合。フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。

※テンセル™は Lenzing AGの商標です。


ジェルトロンピロー マイズα



3層一体成型ジェルトロンを使用した、
最高峰のまくら。

まくら全体が厚さ5.5cmのジェルトロン。仰向き寝の
頸椎から頭部にかけてはもちろん、横向き時の耳、頬
も包み込むように優しく支えます。


サイズ(cm)	重量(kg)	素材
幅60 × 奥行33 × 高さ (中央部5.5～7.5、左右部5.5～9.5)	3.3	ピロー ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン カバー ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ ポリウレタン13%

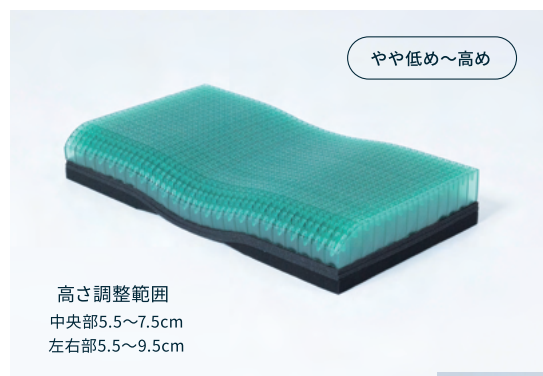

高さ調整範囲
中央部5.5～7.5cm
左右部5.5～9.5cm



ジェルトロンピロー スーパーLOWα

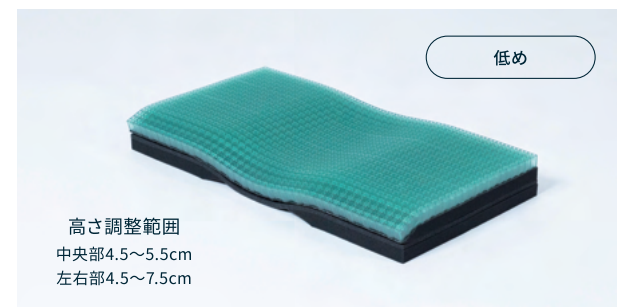



高さ調整範囲
中央部4.5～5.5cm
左右部4.5～7.5cm

表面に厚さ2cmのジェルを使用し、内部中央部分には厚さ2cm
のジェルを使用。低いまくらを好まれる方やストレートネック
の方にもお勧めです。内部ジェルの代わりに保冷材等を入れる
ことが可能で、ひんやりご使用いただけます。

サイズ(cm)	重量(kg)
幅60 × 奥行32 × 高さ (中央部4.5～5.5、左右部4.5～7.5)	2.0

素材
ピロー ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン カバー ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%

ジェルトロンピロー スーパーIIα

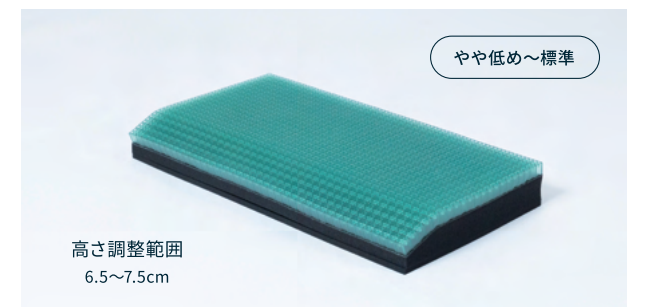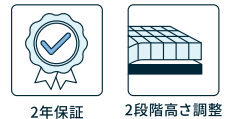

高さ調整範囲
6.5～7.5cm

表面に厚さ2cmのジェルを使用し、内部中央部分には厚さ
4.5cmのジェルを使用。2cmのジェルとウレタンで頸椎をしっ
かり支えます。内部ジェルの代わりに保冷材等を入れることが
可能で、ひんやりご使用いただけます。

サイズ(cm)	重量(kg)
幅60 × 奥行32 × 高さ6.5～7.5	2.3



素材
ピロー ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン カバー ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%

ジェルトロンピロー ムーブ

コンパクトで持ち運びしやすいサイズのまくら。

厚さ4.5cmのジェルを使用し、小さいながらもクッション性があり圧力
吸収に優れています。ミニクッションやヘッドレスト用としてもご使用
いただけます。


サイズ(cm)	重量(g)	素材
幅33 × 奥行18 × 高さ4.5	800	ピロー ジェルトロン カバー ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%

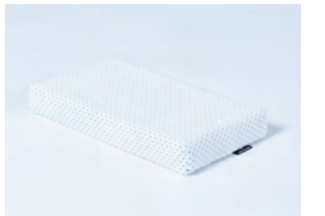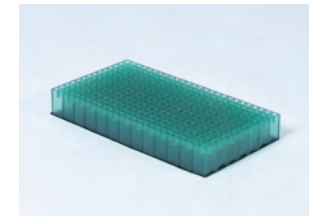

クッション

優れた体圧分散性とずれ吸収力で、臀部への負担、姿勢の崩れを減らします。
デスクワーク、車での移動、車椅子など座る時間の長いシーンにおすすめ。
振動吸収性に優れているので、振動による体への負担も軽減します。


圧力吸収

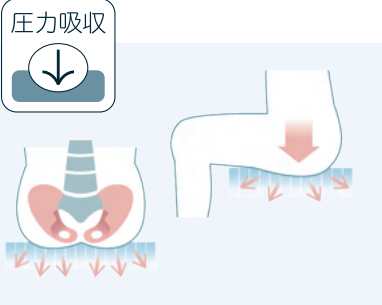

座骨の局部圧を軽減

ジェルトルンが骨突出部分にかかる局部的圧力を吸収し、臀部全体をバランスよく支え、しびれや痛み、不快感を軽減します。


ずれ吸収

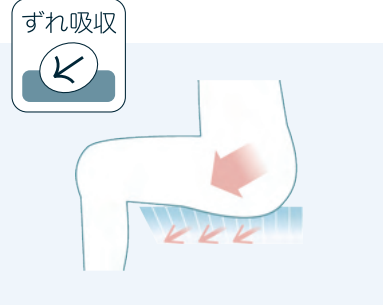

前ずれも吸収

ジェルトルンは斜め方向の荷重も吸収し、仙骨座り等姿勢の崩れを防ぎます。

高通気

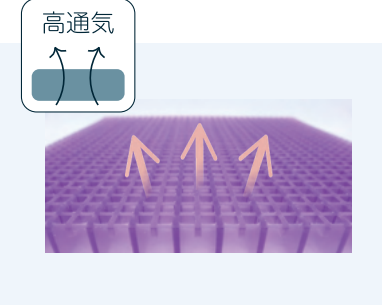

蒸れずに快適

ジェルトルンは立体格子内に空気層を多く含み、使用することで空気の入れ替えを行います。汗による蒸れ等を無くし気持ちよくお使いいただけます。

振動吸収



衝撃・振動を吸収して快適

ジェルトルンは衝撃・振動吸収性に優れ、車椅子走行中の前ずれや衝撃、振動による体への負担を軽減します。

水洗いOK




洗えて衛生的

ジェルトルンクッションは本体・カバーとも洗っていただくことができ、衛生的にご使用いただけます。

各クッション比較

ジェルトルンクッションには多数のラインナップがございます。
ご使用者さまの状態や使用環境に合ったクッションをお選びいただくことで、快適な座位環境を作り出すことができます。

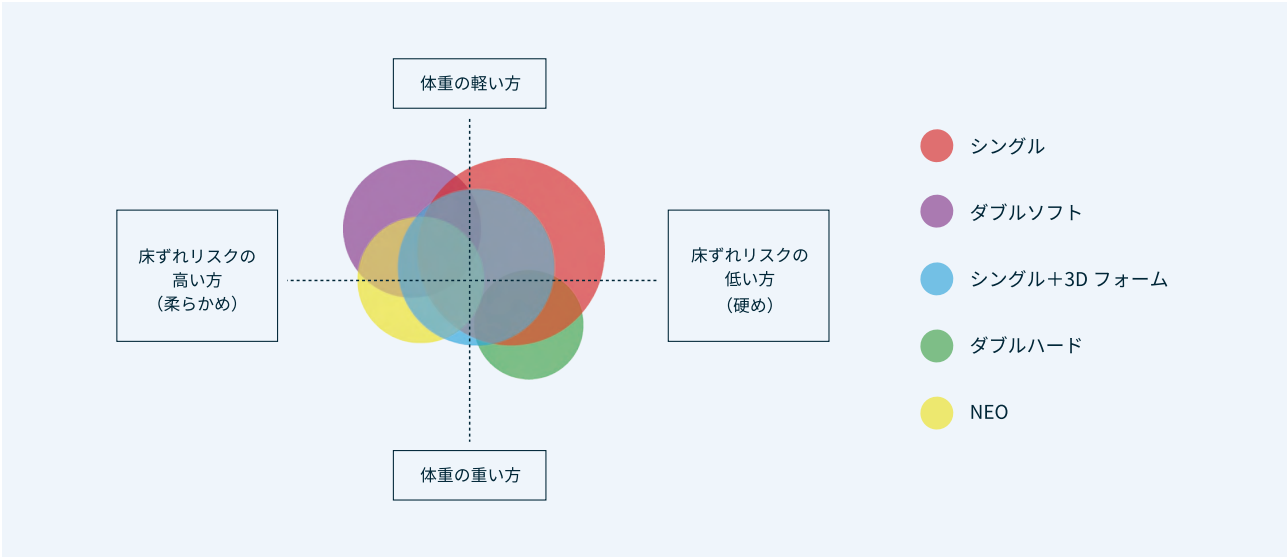

ジェルトルン クッション シングル

厚さ3cmのジェルトルンを使った
車椅子クッションの定番。



立ち上がり、足こぎもしやすく汎用性が高いクッションです。
食卓椅子や座椅子、車での移動など、長時間のご使用にもおすすめです。
水洗いも可能で衛生的にご使用いただけます。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ	幅38 × 奥行38 × 厚み3.5	1.4
42タイプ	幅42 × 奥行38 × 厚み3.5	1.6
素材		
クッション	ジェルトルン	
カバー	座面:ポリエステル100% 側面:ポリエステル100% 底面:PVC-RoHS100% (滑り止め加工)	

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:[38]00839-000004
*TAISコード:[42]00839-000022
シングル38:GTC1S / シングル42:GTC1M

ONLINE SHOP



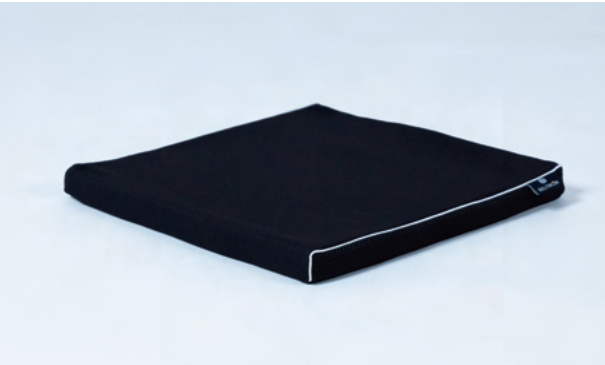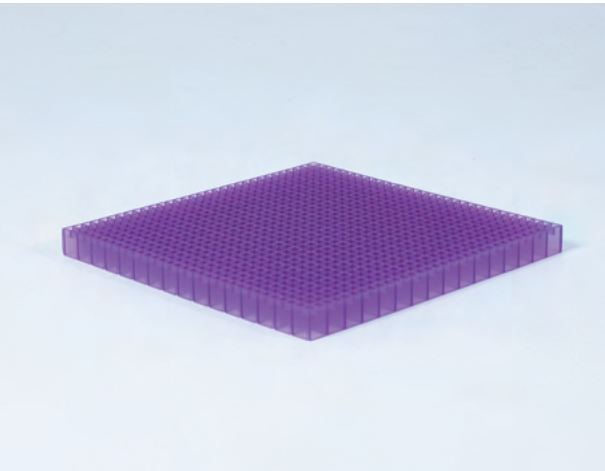

ジェルトルン クッション シングル+3Dフォーム

厚さ3cmのジェルトルンと、高密度3Dフォームを
組み合わせた構造で、座位の安定性、
体圧分散性に優れたクッションです。



臀部の形状に合わせたフォームとジェルトルンの組み合わせで、
前後のずれを減らし、安定性を高めました。
接触面積を広げ体圧分散し、長時間の使用でもバランス良く安定した座
位を保持できるようサポートします。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ	幅38 × 奥行38 × 厚み6.5	1.5
42タイプ	幅42 × 奥行38 × 厚み6.5	1.7
素材		
クッション	ジェルトルン・高密度ウレタン	
カバー	座面:ポリエステル100% 側面:ポリエステル100% 底面:PVC-RoHS100% (滑り止め加工)	

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:[38]00839-000010
*TAISコード:[42]00839-000023
シングル+3Dフォーム38:GTC1S3D / シングル+3Dフォーム42:GTC1M3D

ONLINE SHOP



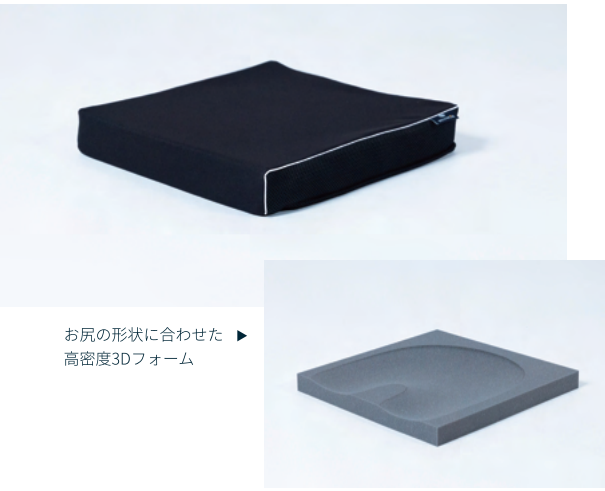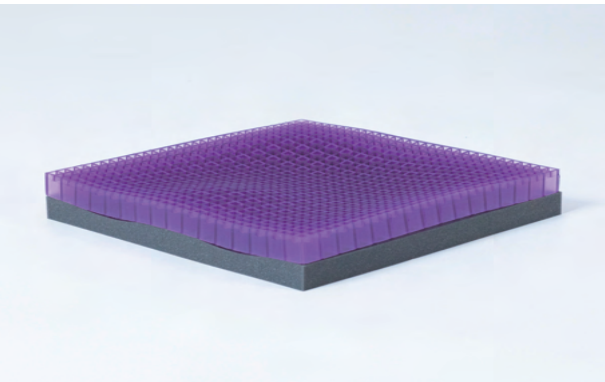

ジェルトロン クッション ダブルソフト


2種類のジェルトロンで
やさしく支える2段構造クッション。

しっかりとした硬さのある厚さ3cmのジェルトロンと、ソフトな感触のジェルトロンパーツ（厚さ2cmジェルトロン+厚さ1.5cm高通気ウレタン）を組み合わせた2段構造タイプ。振動や蒸れの軽減はもちろん、臀部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションです。座位時間が長く、床ずれリスクが高い方におすすめです。カバーには伸縮性に優れたスーパーニット生地を使用しています。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ	幅38 × 奥行38 × 厚み6.5	2.3
40タイプ	幅40 × 奥行38 × 厚み6.5	2.4

素材	
クッション	ジェルトロン・高通気ウレタン
カバー	座面：ナイロン84%・ポリウレタン16% 側面：ポリエステル100% 底面：PVC-RoHS100%（滑り止め）

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:[38]00839-000003
*TAISコード:[40]00839-000029
ダブルソフト38:GTC2SS / ダブルソフト40:GTC2-40S

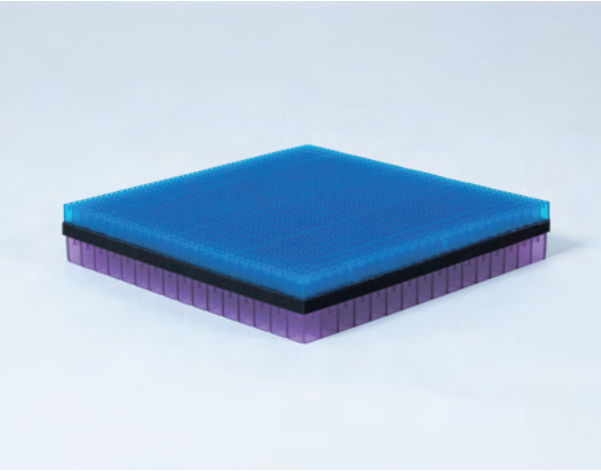

ジェルトロン クッション NEO


バランスをとりやすい
独自のジェルトロン2層構造クッション。

上部に厚さ2cmのソフトタイプと、座骨部分の下に厚さ3cmのジェルトロンを組み込んだ仕様。座骨部分がダブルジェル構造となり、除圧効果をアップし、大腿部での左右の体幹バランスもとりやすい構造です。姿勢の前ずれを軽減し、お尻の位置の安定性を高めます。


寸法(cm)	重量(kg)
幅39 × 奥行38 × 厚み5.5	1.5

素材	
クッション	ジェルトロン・高密度ウレタン
カバー	座面：ポリエステル100% 側面：ポリエステル100% 底面：PVC-RoHS100%（滑り止め加工）

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:00839-000020
NEO:GTC-NEO

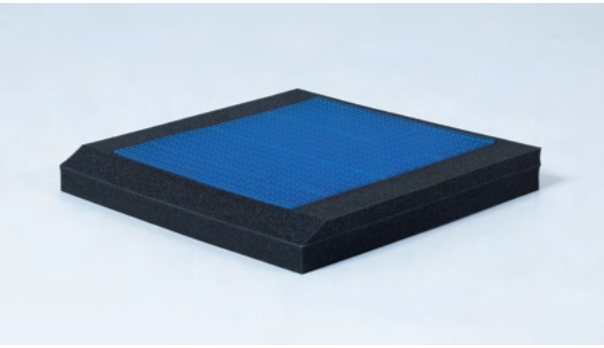

NEOの内部構造 ▶

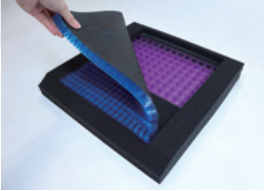

ジェルトロン クッション ダブルハード


2種類のジェルトロンで
しっかり支える2段構造クッション。

しっかりとした硬さのある厚さ3cmのジェルトロンを2枚重ねた2段構造タイプ。振動吸収性や蒸れの軽減に優れ、臀部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションです。体重の重い方で、しっかりとしたクッション性を必要とされる方におすすめです。

サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
38タイプ	幅38 × 奥行38 × 厚み6.5	2.6
42タイプ	幅42 × 奥行38 × 厚み6.5	2.9

素材	
クッション	ジェルトロン
カバー	座面：ポリエステル100% 側面：ポリエステル100% 底面：PVC-RoHS100%（滑り止め加工）

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:[38]00839-000005
ダブルハード38:GTC2SH / ダブルハード42:GTC2MH

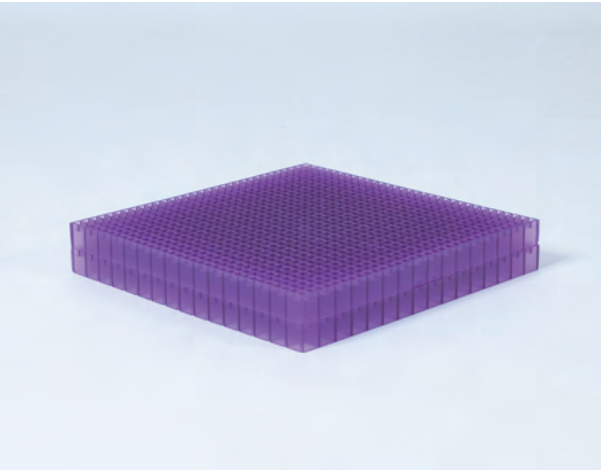

ジェルトロンクッション
ブリーズ

ジェルトロン厚さ 2cm

薄型軽量で持ち運びに便利。
車椅子の背当てにも。

厚さ2cmの薄型ジェルトロンを、蒸れの発散性に優れた高通気ウレタンで挟んだクッションです。座面はもちろん、車椅子の背当て用としてもご使用いただけます。薄型で軽量なので、持ち運びにもおすすめです。二つ折りでのご使用も可能です。

寸法(cm)	重量(kg)
幅42 × 奥行42 × 厚み3.5	0.7

素材	
クッション	ジェルトロン・高通気ウレタン
カバー	座面：ポリエステル100% 底面：ポリエステル100%（滑り止め）

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:00839-000007
ブリーズ:GTC-B



ジェルトロンクッション
ブリーズムーブ

ジェルトロン厚さ 1cm

軽量小型で持ち運びに便利なクッション。
車椅子の背当て用として。

厚さ1cmの薄型ジェルトロンを、蒸れの発散性に優れた高通気ウレタンで挟んだクッションです。2つ折りでもA4サイズになり軽量かつ持ち運びしやすいため、スポーツ観戦や映画鑑賞時、旅行の際の移動時など、使用する場所を選ばない機能的なクッションです。車椅子の背当てクッションとしてもご使用いただけます。

寸法(cm)	重量(kg)
幅44 × 奥行30 × 厚み2.5	0.5

素材	
クッション	ジェルトロン・高通気ウレタン
カバー	座面：ポリエステル100% 底面：ポリエステル100%（滑り止め）

*介護保険適用福祉用具／車椅子付属品
*TAISコード:00839-000024
ブリーズムーブ:GTC-BM



ジェルترون

体位変換クッション

側臥位保持・体位変換のサポートに。

適度な硬さのウレタンで30度保持がしやすい体位変換サポートクッションです。体を支える面に厚さ2cmの薄型ジェルترونを使用し、側臥位時のずれを吸収。オムツ交換時や車椅子での姿勢保持にもお使いいただけます。



▲ サイズは標準とロングの2タイプ

使用例

仰臥時
仙骨部分・かかとの
圧迫軽減



肩・腕下に

車椅子シーティング
補助まくらに

側臥時
姿勢の保持・仙骨部の
圧迫軽減



オムツ交換時

カバーには汗や水分による蒸れを軽減する「高通気カバー」と、汚れがしみ込まずサッと拭き取れる「防水清拭カバー」の2タイプがあります。



サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
標準タイプ	幅 35 × 奥行 21 × 高さ 12	0.6
ロングタイプ	幅 70 × 奥行 21 × 高さ 12	1.2

素材	
クッション	ジェルترون・高透気ウレタン
高通気カバー	表面:ポリエステル90%・綿10% 底面:ポリエステル100%

*介護保険適応福祉用具／体位変換器
*TAISコード:[標準]00839-000013
*TAISコード:[ロング]00839-000028

標準タイプ・高通気カバー仕様:GTC-TH
ロングタイプ・高通気カバー仕様:GTC-THL



サイズ	寸法(cm)	重量(kg)
標準タイプ	幅 35 × 奥行 21 × 高さ 12	0.6
ロングタイプ	幅 70 × 奥行 21 × 高さ 12	1.2

素材	
クッション	ジェルترون・高透気ウレタン
防水清拭カバー	ポリエステル100% ポリウレタンフィルム

標準タイプ・防水清拭カバー仕様:GTC-THB
ロングタイプ・防水清拭カバー仕様:GTC-THLB

ONLINE SHOP



ジェルترون ベビーまくら

baby fit

(ベビーフィット)

サイズの調整が可能で、座位保持装置やバギーのヘッドレストとしても更にご使用しやすくなりました。頭部や耳などの局所の除圧にも使用可能で、医療・介護の現場でもご使用いただけます。



裏面の面ファスナーでサイズ調整可能 ▶

サイズ(cm)		重量(g)	素材	
幅 21.5～25.5 × 奥行 24 × 高さ 3		160	ビロー	ジェルترون・高透気ウレタン
			カバー	ポリエステル100% (面ファスナー:ナイロン100%)

ONLINE SHOP





ジェルترون ベビーまくら

Child fit

(チャイルドフィット)

まくら底面フォームにくぼみを持たせ、頭部を安定、座位保持装置やバギーのヘッドレストとしてもご使用が可能です。使用しやすい薄さで、医療・介護の現場でも活躍しています。

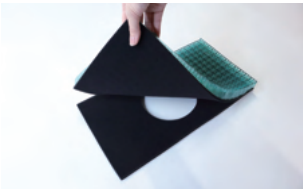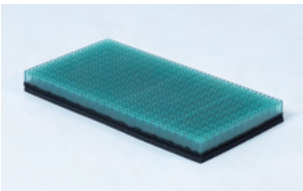

後頭部にフィットするように中央部を ▶
円形状にカットしたベースウレタンが付属

サイズ(cm)		重量(g)	素材	
幅 37 × 奥行 23 × 高さ 4		500	ビロー	ジェルترون・高透気ウレタン・高密度ウレタン
			カバー	オーガニックコットン100%

ONLINE SHOP



ショルダーパッド(スタンダードタイプ)

バッグの重さや蒸れが軽減されるジェルترون ショルダーパッド。バッグに取り付けることで肩からのずり落ちを防ぎ、肩への負担を軽減します。

サイズ	寸法(cm) ※()内は取付時のサイズ		重量(g)
S	幅15(5) × 長さ17.5 × 厚み1.5	対応ベルト幅:最大4.5cm	50
M	幅17.5(6) × 長さ22 × 厚み1.5	対応ベルト幅:最大5.5cm	80
L	幅23(9) × 長さ25.5 × 厚み1.5	対応ベルト幅:最大8.5cm	130

素材

中身:ジェルترون
表面:ナイロン100% (表面生地裏側)ウレタンコーティング
内面:ポリエステル65%・コットン35%
底面:ポリエステル/ポリウレタン(滑り止め)

ONLINESHOP

